



NL

KOBA VISION

SenseView P430



Handleiding

1. SenseView P430 – Verpakking

- P430
- AC adapter
- Handleiding
- Draagzakje
- Armstrap

2. Batterij gebruik / onderhoud

- De batterij moet ongeveer 3 uur volledig opgeladen worden voor het eerste gebruik. Sluit a.u.b. de AC adapter aan op de DC input om de batterij op te laden.
- Verwijder a.u.b. de veiligheidsfolie van het LCD voor het eerste gebruik.
- Gebruik enkel de bijgeleverde AC adapter om elektrische schade te voorkomen.
- Stel het toestel niet bloot aan water of vochtigheid om vuur of elektrische schokken te voorkomen.
- Laat het toestel enkel herstellen door een gekwalificeerde servicedienst.
- Na 6 maanden gebruik kan de batterij minder lang aan één stuk meegaan.
- De laatst gebruikte instellingen voor u het toestel uitschakelt zullen herladen worden wanneer u het toestel terug aanschakelt.


3. Knoppen en werking

- A. Aan / Uit schakelaar: Schuif de schakelaar naar onder en laat de knop los om het toestel aan of uit te schakelen. Wanneer het toestel aangeschakeld is ziet u op het scherm eerst gedurende 2 seconden het SenseView Logo. Hierna kan u het toestel gebruiken.
- B. Vergrotingsknop: Bij het indrukken van de vergrotingsknop (+/-) kan de vergroting in stappen geregeld worden (1-9)
Vergrotingsgebieden:

Stap	Geen standers	Standers
1	4.7	6.7

2	6.0	8.0
3	6.8	9.5
4	8.4	11.6
5	9.5	13.0
6	10.3	13.6
7	11.9	15.8
8	13.6	19.0
9	15.8	22.5

- C. Knop voor stilstand beeld: druk op deze knop om de beelden te 'bevriezen'. Druk terug op deze knop om verder te lezen.
- D. Camera aanwijzer: dit geeft de positie van de cameraleens aan. Wanneer het toestel in de besparingsmode staat, flikkert deze aanwijzer. (De besparingsmode zal uitgelegd worden in hoofdstuk 4 in deze handleiding).
- E. Helderheid knop: hiermee kan u het scherm donkerder en lichter maken in 4 stappen. Wanneer u op stap 4 bent, kan u door opnieuw te drukken terug naar stap 1 gaan.
- F. Externe video invoer: hier kan u een externe camera aansluiten, te verkrijgen als optie.
- G. Kleurmode knop: door op deze knop te drukken wisselt u de verschillende kleurmoden. Er zijn 6 kleurmoden:
- Kleurmode
 - Zwarte letters op witte achtergrond
 - Witte letters op zwarte achtergrond
 - Gele letters op blauwe achtergrond
 - Blauwe letters op gele achtergrond
 - Blauwe letters op witte achtergrond
- Wanneer u op stap 6 bent, kan u door opnieuw te drukken terug naar stap 1 gaan.
- H. DC invoer: om de batterij op te laden moet u hier de AC adapter aansluiten.
- I. Schuifhendel: trek deze hendel uit om te voorkomen dat u de camera kan afdekken met uw hand.
- J. Gat voor de armstrap: hierin kan u de armstrap bevestigen.

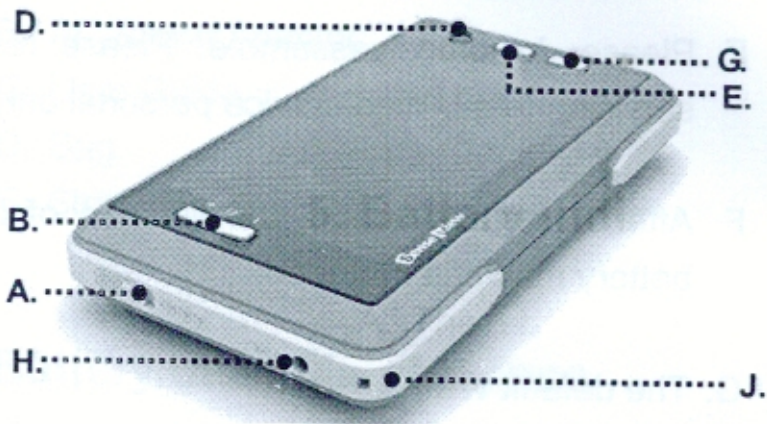

4. Besparingsmode

- Wanneer het toestel aanstaat en het wordt gedurende 3 minuten niet gebruikt, dan wordt de besparingsmode geactiveerd. In de besparingsmode wordt de backlight van het LCD scherm uitgeschakeld en de camera aanwijzer flinkt.
- Om uit de besparingsmode te gaan drukt u op een knop of beweegt u het toestel.

- Wanneer het toestel in de besparingsmode staat en het wordt gedurende 7 minuten niet gebruikt, dan wordt het toestel volledig uitgeschakeld. Als u het toestel opnieuw wilt gebruiken, moet u het toestel terug aanschakelen.
- Wanneer u in de mode staat van stilstaand beeld en het toestel wordt gedurende 10 minuten niet gebruikt, dan wordt het toestel volledig uitgeschakeld.

5. Batterij indicator

- De batterij aanwijzer wordt weergegeven rechtsboven op het scherm. Het geeft de voortgang van het opladen weer. Als de batterij moet herladen worden flakkert de batterij aanwijzer. 
- Wanneer u de "kleurmode" knop samen met de "verkleiningsknop (-)" indrukt wordt de batterij aanwijzer op het scherm weergegeven. Wanneer u deze knoppen opnieuw samen indrukt verdwijnt de batterij aanwijzer van het scherm.
- De batterij aanwijzer is rood gekleurd wanneer het toestel aan het herladen is. Wanneer de batterij volledig opgeladen is wordt de batterij aanwijzer groen.
 - Zelfs wanneer de batterij aanwijzer groen gekleurd is kan u het toestel nog enkele uren laten opladen.
- Wanneer de AC adapter uit het toestel wordt getrokken verandert de kleur van de batterij aanwijzer naar blauw.

6. Aan of uitschakelen van het geluid

- Wanneer u op een toets drukt van het toestel hoort u een biepje.
- Wanneer u de vergrotingsknop (+) en de helderheid knop samen indrukt kan u het biepje geluid aan of uitschakelen.

7. Specificaties

- LCD scherm: 4,3 inch breedbeeld QVGA TFT-LCD scherm (16:10 verhouding)
- Vergroting: x4,7 ~ x22,5
- Helderheid: stap 1 tot 4
- Kleuren: 6 kleurmodes. Kleurmode, zwarte letters op witte achtergrond, witte letters op zwarte achtergrond, gele letters op blauwe achtergrond, blauwe letters op gele achtergrond,

blauwe letters op witte achtergrond.

- Externe video invoer
- Batterij type: Lithium polymeer
 - Batterijtijd: 5 uur
 - Herlaadtijd: 3 uur
- Schuifhendel
- Dimensies: 83mm (breed) x 146mm (diep) x 22,5mm (hoog)
(25mm hoog als de staanders gebruikt worden)
- Gewicht: 221 gram

8. Garantie – 1 jaar

De SenseView P430 heeft 1 jaar garantie uitgezonderd de batterij.

KOBA Vision

De Oude Hoeven 6
3971 Leopoldsburg

Tel. +32 11 344513

Fax +32 11 348525

info@kobavision.be

<http://www.kobavision.be>